



Nazca POP Repair System es un sistema de reparación de POP (prolapso de órganos pélvicos), constituido por un implante de polipropileno tipo 1 y un kit de agujas, que permite una reparación anatómica y funcional del piso pélvico.


## Un sistema, dos alternativas



- Es un sistema indicado para la corrección de prolapsos del compartimiento anterior y ofrece la posibilidad de controlar la IUE cuando la causa principal es la hiperactividad uretral.



- **Nazca TC POP Repair System** tiene cuatro brazos de fijación: dos brazos prepúbicos y dos brazos transobturatorios. El diseño de Nazca TC permite también realizar un abordaje doble transobturatorio.

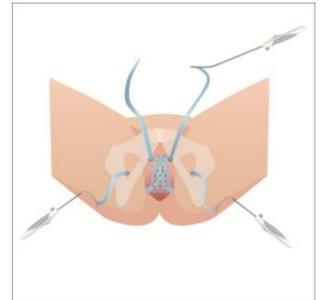



- El sistema se completa con una aguja prepúbica con mango ergonómico para movimientos de inserción, y dos agujas transobturatorias semicirculares con mango ergonómico para los movimientos rotacionales.



## Nazca R

POP Repair System

- Es un sistema indicado para la corrección de prolapsos del compartimiento posterior y apical. **Nazca R POP Repair System** está diseñado para restaurar la anatomía normal en pacientes con prolapso de cúpula vaginal y rectocele.
- **Nazca R POP Repair System** tiene dos puntos de anclaje: sus brazos de fijación posteriores.
- Las agujas que completan el sistema están especialmente diseñadas para realizar un abordaje transglúteo y un firme anclaje en el ligamento sacroespinoso. Tienen diámetro diferencial y los mangos ergonómicos poseen un diseño para movimientos de inserción, lo que permite una buena maniobrabilidad con mínima invasividad.

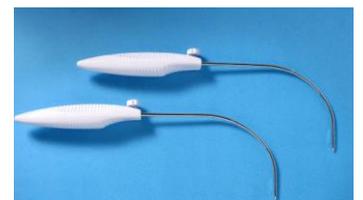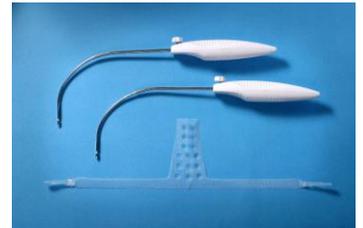

## Nazca POP Repair System ofrece

- Abordaje mínimamente invasivo.
- Excelentes resultados a largo plazo: mínima tasa de recidiva.
- Soporte uretral libre de tensión.

## ¿Por qué elegir Nazca POP Repair System?

- Control combinado del POP anterior e IUE.
- Curva de aprendizaje corta
- Óptimos resultados clínicos y funcionales.
- Orificios de 6 mm de diámetro en el área central de la malla promueven el crecimiento tisular dentro de la malla, y minimizan el encogimiento del material sintético.

## Presentación del producto

### Nazca TC POP Repair System incluye:

- 1 implante Nazca TC
- 2 agujas semi-circulares transobturatorias.
- 1 aguja prepúbica

### Nazca R POP Repair System incluye:

- 1 implante Nazca R
- 2 agujas posteriores.

## Técnicas Quirúrgicas

La posibilidad de optar entre diferentes abordajes quirúrgicos es una de las características diferenciales de **Nazca POP Repair System** que le ayudará a ofrecer la mejor solución a su paciente.

- Técnica quirúrgica Reparación del Prolapso Anterior Nazca TC POP Repair System (abordaje prepúbico y TOT combinado y abordaje doble TOT)

[Para ver el video, regístrese en la sección médicos de nuestro sitio web](#)

- Técnica quirúrgica para el Prolapso Posterior Nazca R POP Repair System (Rectocele / Cúpula Vaginal)

[Para ver el video, regístrese en la sección médicos de nuestro sitio web](#)

- Técnica quirúrgica para el Prolapso Anterior y Posterior Nazca TC POP Repair System + Nazca R POP Repair System

[Para ver el video, regístrese en la sección médicos de nuestro sitio web](#)

La descripción de la técnica quirúrgica, selección de pacientes, advertencias, contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta, se encuentran desarrolladas en el Manual de Usuario de **Nazca TC POP Repair System** y **Nazca R POP Repair System**. Se sugiere consultar este material para obtener mayor información.

Para consultas sobre Nazca, contacte el Centro de Educación Médica de Promedon [womenhealth@promedon.com](mailto:womenhealth@promedon.com)



[REGRESAR AL SITIO WEB](#)